


## Talutusvyö ja siirtovyö



Oivallinen apu turvalliseen talutus- ja siirtotoimintaan. Tarranauhaisen säädettävyyden ansiosta sopii useimmille käyttäjille, antaen tarvittavan tuen ergonomisesti. Materiaali on tukevaa pes/co twillia.



Vyön sisäpuolella on kumi-pintainen vahvike, joka estää vyön liukumisen nostotilanteessa.

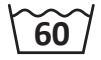

## Pehmustettu turvavyö



Kevyempirakenteinen turvaväline istuvien henkilöiden tueksi. Vyötärön kohdalle tuleva leveämpi osa on pehmustettua mikrokangasta ja siinä on pikalukollinen säädettävä kiinnityshihna.




## Haarakiilallinen istuinturvavyö



Istuinturvavyö jolla käyttäjä saadaan tuettua turvallisesti pyörätuoliin tai muuhun selkänojalliseen istuimeen. Se koostuu pehmustetusta, kosteutta läpäisemättömästä istuinalustasta, jonka koko on noin 36 x 37 cm, pehmustetusta etupalasta sekä riittävän pitkistä kiinnityshihnoista. Toisella hihnalla kiinnitetään istuinturvavyö istuimeen ja toisella tuetaan hoidettava selkänojaan. Molemmat hihnat ovat säädettäviä ja niissä on pikalukkokiinnitys.

Materiaali on tukevaa pes/co twillia.

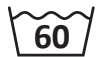

## Liukuputki



Liukuputki on tarkoitettu helpottamaan potilaiden siirtoja ja kääntelyjä sekä hänen oman liikkuvuuden lisäämiseen. Helpon pakattavuutensa ansiosta liukuputki kulkee helposti mukana ja se on oiva apuväline käytettäväksi mm. autoon istumisessa ja sieltä poistumisessa. Voidaan pestä 60 asteen lämpötilassa, ei suositella kuivausrumpua.





## Liukuhanskat



Helpottavat potilaan siirtelyä ja kääntelyä vuoteessa vähentämällä kitkaa. Hoitajan kädessä olevat hanskat laitetaan lantion ja lapaluiden alle. Hanskan koko on noin 22 x 55 cm ja se on varustettu ripustuslenkillä. Suuaukossa oleva kuminauha varmistaa paikallaan pysymisen.



## Liukulakana




Liukulakana helpottaa vuodepotilaan omatoimista kääntymistä. Keskellä oleva liukuosa on satiinisidoksisista polyesterikangasta. Isokokoiset puuvillaiset patjan alle käännettävät siivekkeet auttavat lakanan paikallaan pysymistä.

Koko 100 x 220 cm

Sopii 80, 90 ja 120 cm leveisiin sänkyihin.



## Sängynlaidan pehmuste

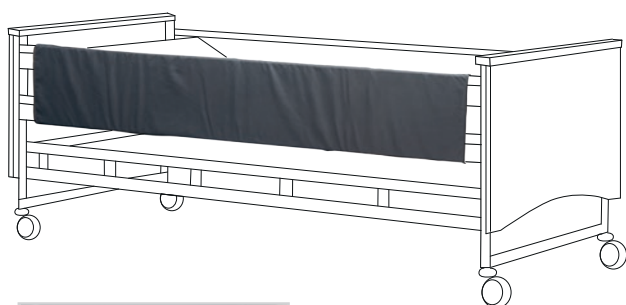

Potilaille, joilla on ongelmana itsensä kolhiminen laitoihin tai jalan ja käden pujottaminen pintojen väliin. Likaa hylkivä pehmuste on kulutusta kestävä materiaalia ja se kiinnitetään sängynlaidan ympäri tarranauhalla. Sisäpuolella olevassa vetoketjullisessa taskussa on erillinen pehmuste. Pehmuste ei estä sängynlaidan laskemista alas.

Pehmusteen pituus on 180 cm.

Korkeus on säädettävissä matalampaan tai korkeampaan sängynlaitaan.



## Terapiarenkaat



Terapiarenkaat ovat mukavaa ajankulua henkilöille, jotka tarvitsevat käsilleen tekemistä. Ne parantavat samalla lihasvoimia ja verenkiertoa sekä sormien liikkuvuutta. Terapiarenkaan lenkit on valmistettu miellyttävästä ja tukevasta puuvilla/polyesteristä. Moniväristen palojen sisällä on eri muotoisia, kokoisia ja tuntuja täytteitä.

Voidaan pestä 60 asteen lämmössä.



## Asentotyyny tyynynsuojalla

Asentotyyny auttaa painehaavojen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Sopii käytettäväksi istuma- tai makuuasennossa, esim. polvitaiveen alla. Asentotyyny on 80 cm sängyn levyinen, joten pysyy hyvin paikoillaan.


Tyynyssä on pehmeä tikattu päällinen, joka voidaan irroittaa ja pestä. Täyte on lämmöstä muokkautuvaa viskoelastista vaahtomuovia ja silikonoitua polyesteriontelokuituseosta.

**Mukana toimitetaan erillinen tyynynsuoja**, joka on hengittävää, nesteitä läpäisemätöntä ja pehmeää polyesterifroteeta.



- Koko 28x80 cm
- Päällinen valkoinen 100 % puuvillakangas + tikattu pes-vanutikkaus
- Täyte 60 % viskoelastista vaahtomuovi-rouhetta, 40 % silikonoitua pes-ontelokuitua
- Pesu päällinen 60 °C, sisätyynyä ei voi pestä

Tyynynsuoja polyesterifrotee, pesu 90 °C

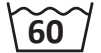

## Vartalotyyny tyynynsuojalla

Vartalotyynyn pitkä muoto auttaa pitämään vartalon ja selkärangan oikeassa asennossa eri nukkumisasennoissa. Sopii esim. selkä- ja hartiasäryistä kärsiville sekä raskaana oleville.

Tyynyssä on pehmeä, tikattu päällinen, joka voidaan irroittaa ja pestä 60 asteen lämmössä.

**Mukana toimitetaan erillinen tyynynsuoja**, joka on hengittävää, nesteitä läpäisemätöntä ja pehmeää polyesterifroteeta.



- Koko 40 x 145 cm
- Kangas miellyttävää pes-mikrokuitukangasta, valkoinen
- Täyte silikonoitua pes-ontelokuitua
- Pesu päällinen 60 °C, sisätyynyä ei voi pestä

Tyynynsuoja polyesterifrotee, pesu 90 °C



## Pelastuslakana



Pelastuslakana on hengittävyytensä vuoksi sopiva käytettäväksi sängyissä joissa mahdollisesti kosteus-suojaus. Kankaana on käytetty Flamestat 290 (75% co 24% pes 1% antistat) 290g/m2 palosuojattua materiaalia. Täyttää standardin EN20471.

Erytisominaisuutensa vuoksi pelastuslakana on huomiota herättävä tilanteissa joissa esim. huonon valaistuksen tai savun vuoksi näkyvyys on rajoittunut.

Lakanassa on potilaan ympärille tulevat lukolliset kiinnitysvyöt sekä molemmissa päissä leveät vetohihnat, jotka kulkevat yhtenäisesti lakanan päästä toiseen. Kiinnityslukot ovat ns. pikalukkoja, jotka on helppo kiristää. Lukko painetaan kiinni ja hihnat vedetään kireälle.

Pelastuslakana pedataan sängyn ja patjan väliin toimintavalmiiksi. Häätötilanteessa kiinnitysvyöt otetaan esiin ja potilas sidotaan patjoineen ja sänkyvaatteineen voiden lukoilla kuljetuskelpoiseksi "paketiksi". Jokaisessa lakanassa on kiinnitettyä käyttöohje. Pelastuslakanalla voidaan vetää 150 kg:n kuormaa.

Koko 75 x 200 cm

